


# La phase préanalytique : **une étape clé**



*Ceci n'est pas un tube,  
c'est un **patient**.*

- **Port de gants** non stériles.
- **Désinfection** large du site de ponction.
- Ne **jamais palper le site** après désinfection.
- Le **garrot** ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine. Le **relâcher** dès que le sang s'écoule dans le 1<sup>er</sup> tube.
- **Choix du site** de ponction : ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.
- **Maintenir le tube** en dessous du point de ponction.
- **Lors du prélèvement** positionner le tube, étiquette vers le bas pour pouvoir visualiser l'arrivée du sang dans le tube.
- Veiller au bon remplissage des tubes.
- Il est recommandé d'**homogénéiser** le tube **dès le retrait** du corps de prélèvement, par **plusieurs retournements lents**.
- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

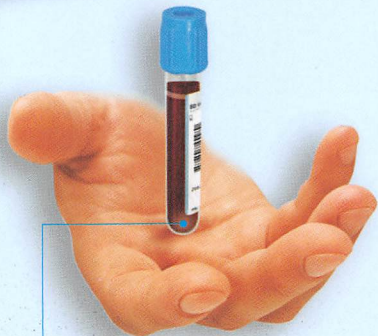

# Ordre de prélèvement

Recommandations CLSI, H3-A6, 2007 et GEHT 2007 ([www.geht.org](http://www.geht.org))

## AIGUILLE



CITRATE



SST



CAT



PST



LH



EDTA



GLUCOSE



AUTRES

## UNITÉ À AILETTES



Flacon aérobic



Flacon anaérobie



*Sans hémoculture*



Tube neutre  
(sans additif)

